

Функциональные возможности

1. Спинка кресла принимает S –образную форму, более удобную для пользователя и достигающую лучших массажных результатов

2. Массажное действие очень мягкое и гладкое, создает впечатление массажа человеческими руками.

Массажный механизм спинного отдела кресла может перемещаться вверх и вниз по шее, плечам, спине и пояснице, выполняя разглаживание, постукивание, синхронные массажные методы; скорость и ширину массажного механизма можно свободно изменять. Он может ослабить мышечную боль, улучшить кровообращение.



разглаживание




постукивание



синхронизация
разглаживания и
постукивания

3. Воздушный «волновой» массаж для нижней части тела

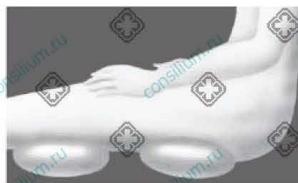

Есть 2 воздушных камеры у бедер и ягодиц



Есть 8 воздушных камер у икроножных мышц

Health Life Expert



● Воздушный массаж икроножных мышц имитирует натягивающий-растягивающий массаж человеческих рук. Во время подъема и спуска подставки для ног четыре пары воздушных камер перемещают циркуляцию воздуха верхнего и нижнего отдела ног, имитируя ручной массаж.



Во время как две верхние пары камер выпускают воздух, две нижние начинают впускать

Во время как две верхние пары камер впускают воздух, две нижние начинают выпускать

Подставка для ног поднимается и опускается поочередно

4. Выбор автоматической функции



Способ автоматического массажа шей и плеч



Способ автоматического массажа спины и поясницы.



Способ автоматического массажа нижней части тела.



Может включить или выключить все воздушные камеры



При автоматическом способе при поднятии и опускании подставки для ног воздушный массаж имитирует растягивающий-натягивающий и постукивающий ручной массаж.



Прекратит все массажные действия, 6 колесиков массажного механизма автоматически переместятся вверх, спинная подушка поднимается до верхнего положения, а икроножный отдел опускается до нижнего положения одновременно.

Health Life Expert

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ ЧАСТИ

панель управления

A. Автоматическое управление функцией спинного отдела кресла

[neck & shoulder auto] Выбор программы автоматического контроля массажа шеи и плеч.
[back & waist auto] Выбор программы автоматического контроля массажа спины и поясницы.
[upper half-length auto] Выбор программы автоматического контроля массажа верхней части тела

B. Ручное управление функцией спинного отдела кресла

B1 Выбор массажных режимов

[knead]: Выбор разглаживающего массажа
[knock]: выбор массажа постукивания
[kneading & knocking synchronization]: выбор одновременного разглаживающего и постукивающего массажа

При автоматическом массаже спины нажмите клавишу locate для включения массажа Шиатцу (Глубокое и сильное нажатия, для снятия напряжения)


B2. Другие варианты управления массажной программой

[extent]: При массажных режимах постукивания и надавливания пальцами может менять ширину массажного механизма спины. Существуют широкий, средний и узкий типы на ваш выбор.
[speed]: Выбирает скоростной режим массажа. Существуют быстрый, средний и медленный на выбор.
[locate]: Выбирает расположение массажного механизма. Существуют четыре режима на выбор.
Upper half-length: Верхняя часть тела, вся спина
Neck&shoulder: Шея и плечи: положение шеи и плечи (верхняя часть спины)
Back&waist: Спина и поясница: положение спины и поясница (нижняя часть спины)
point: Точка: точечный режим.
[up]: При точечном режиме удерживайте клавишу, массажный механизм спинного отдела поднимается, отпустите клавишу и он остановится. Когда массажный механизм достигнет верхней точки, панель управления просигнализирует звуком.
[down]: При точечном режиме удерживайте клавишу, массажный механизм спинного отдела опускается, отпустите клавишу и он остановится. Когда массажный механизм достигнет нижней точки, панель управления просигнализирует звуком

A

B1

B2

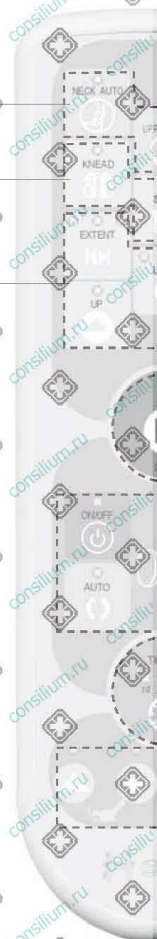

Health Life Expert

НИЯ

С. управление воздушными камерами

[on/off]: Включает/выключает воздушный массаж.

[auto]: Включает автоматический массажный режим. При данном режиме используется методы вытягивания-растягивания.

[strength]: включает силу воздушного массажа. Есть сильный и слабый режим на выбор.

[locate]: Выбор комбинированного режима воздушного массажа. Есть три комбинированных режима: 1. икроножный 2. бедра + ягодицы 3. икры + бедра + ягодицы

D. Управление функциями таймера

[timing]: Выбор времени массажа. Существует три периода времени: 10, 20 и 30 мин.

E. Остановка всех функций, и возвращения кресла в исходное положение

[stop]: Выключить все массажные функции.

F. управление поднятием и опусканием спинного и ножного отделов

[]: Управление поднятием ножного отдела: удерживайте эту клавишу, ножной отдел поднимается, при опускании он остановится. Когда подставка для ног достигнет верхней позиции панель управления издаст тревожный сигнал

[]: Управление опусканием ножного отдела: удерживайте эту клавишу, ножной отдел опускается, при опускании он остановится. Когда подставка для ног достигнет нижней позиции панель управления издаст подает тревожный сигнал.

[]: Управление поднятием спинки: подъем и опускание спинного и ножного отделов кресла использует синхронный метод, при этом спинка является ведущим фактором. Удерживайте клавишу и спинка поднимается а подставка для ног опускается в то же время. Отпустите клавишу и они остановятся. Когда спинка достигнет верхнего положения, панель управления издаст тревожный сигнал

[]: Управление опусканием спинного отдела кресла: подъем и опускание спинного и ножного отделов кресла использует синхронный метод, при этом спинка является ведущим фактором. Удерживайте клавишу и спинка опускается а подставка для ног поднимается в то же время. Отпустите клавишу и они остановятся. Когда спинка достигнет нижнего положения, панель управления издаст тревожный сигнал.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СПОСОБ ПОДЪЕМА СПИННОГО ОТДЕЛА КРЕСЛА

Подъем спинного отдела кресла, нажмите спинка будет подниматься медленно, а подставка для ног опускаться. Отпустите клавишу, все остановится. Когда спинка достигнет верхней точки, она автоматически остановится.



способ использования спинки



Опускание спинного отдела кресла: нажмите спинка будет медленно опускаться, подставка для ног поднимается, если отпустить все остановится. Когда спинка достигнет нижнего положения, она автоматически прекратит опускаться.



! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Когда спинной отдел опускается, пожалуйста, проследите, чтобы под сиденьем не было людей или предметов во избежание несчастных случаев, ранений или повреждений предметов

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСТАВКИ

Способ поднятия и опускания подставки для ног

Способ поднятия и опускания подставки для ног такой же что и способ поднятия и опускания спинного отдела кресла.

Подставка для ног поднимается

Кнопка подъема Кнопка спуска

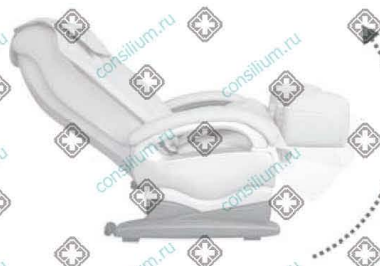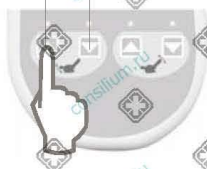

Подставка опускается

Кнопка подъема Кнопка спуска



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда подставка для ног поднимается, пожалуйста, проследите, чтобы под ней не было предметов или людей во избежание ранений и повреждений.