


ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


- 1. Конструкция спинки обеспечивает комфорт и эффективность массажа.

2. Деликатный массаж одновременно воздействует на все тело.

Механизм переключения спинки, расположенный между шеей и талией, позволяет устанавливать различные режимы массажа: разминание, похлопывание, надавливание и комбинированные виды массажа. Регулировка скорости и ширины импульсов позволяет ослабить напряжение в мышцах и улучшить циркуляцию крови.

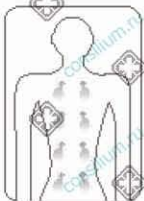

Разминание

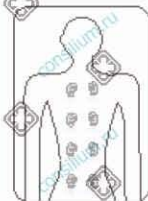

Похлопывание




Комбинированный массаж




Надавливание

3. В нижней части спины предусмотрен механизм для волнового массажа.

Воздушные подушки, облегающие бедра, ягодицы и ноги, обеспечивают эффективный воздушный массаж и позволяют снизить нервное напряжение и улучшить циркуляцию крови в нижней части тела.

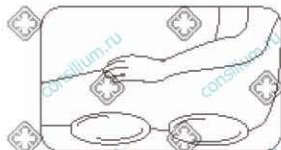

Воздушные подушки, облегающие бедра и ягодицы

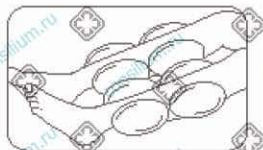

Воздушные подушки для ног и ступней

4. Общие автоматические команды



Приостановить все опции массажа, автоматически опустить спинку и подножку



Выбор автоматических команд для верхней части спинки (всей спинки)



Шея и плечи: выбор автоматических команд для массирования шеи и плеч



Спина и талия: выбор автоматических команд для массирования спины и талии












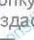


Включение автоматических команд для воздушных подушек



Интенсивность воздушного давления: выбор силы воздушного давления («слабое» или «сильное»).

НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

НАРУЖИНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

-  Включение/ отключение функций массажа
-  Выбор продолжительности массажа 10, 20 или 30 минут
-  Отключение всех функций массажа и автоматический возврат спинки кресла в исходное положение
 - Автоматические программы массажа верхней части спины
-  Выбор автоматической программы управления верхней частью спинки кресла (всей спинки)
-  Выбор автоматической программы массажа шеи и плеч
-  Выбор автоматической программы массажа спины и талии
 - Автоматические программы массажа нижней части тела
-  Автоматические программы включения воздушных подушек
-  Плотность воздушных подушек: выбор уровня давления в воздушных подушках между «сильным» и «слабым»
-  Подъем спинки кресла: подъем спинки кресла сопровождается опусканием подножки. Отпустите кнопку, чтобы прекратить движение спинки. Когда спинка достигнет максимально высокого положения, раздастся предупреждающий сигнал.
-  Опускание спинки кресла: при нажатии на эту кнопку начнется опускание спинки кресла, сопровождающееся подъемом подножки. Отпустите кнопку, чтобы прекратить движение спинки. Когда спинка достигнет максимально низкого положения, раздастся предупреждающий сигнал.
-  Подъем подножки: При нажатии на эту кнопку подножка станет подниматься. Отпустите кнопку, чтобы прекратить движение подножки. Когда подножка достигнет максимально высокого положения, раздастся предупреждающий сигнал.
-  Опускание подножки: При нажатии на эту кнопку подножка станет опускаться. Отпустите кнопку, чтобы прекратить движение подножки. Когда подножка достигнет максимально низкого положения, раздастся предупреждающий сигнал.



НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Регулирование воспроизведения музыки



- ▶ Воспроизведение трека
- ▶ Пауза текущего трека
- ▶ Предыдущий трек
- ▶ Следующий трек
- ▶ Увеличить громкость
- ▶ Уменьшить громкость

Массаж верхней части тела

- ▶ Выбор режима разминания
- ▶ Выбор режима похлопывания
- ▶ Выбор режима надавливания/шлицу
- ▶ Выбор комбинированного режима массажа: разминание/похлопывание
- ▶ Регулирование скорости массажа: SLOW (медленная), MODERATE (средняя), FAST (быстрая). Данная функция недоступна в режиме массажа «надавливание».
- ▶ Регулирование ширины участка массажа: NARROW (узкая), MIDDLE (средняя), WIDE (широкая). Данная функция доступна только в режиме массажа «похлопывание» и «надавливание».
- ▶ Выбор места массажа – спины: ОБЩИЙ, ЧАСТИЧНЫЙ (плечи, спина или талия) или ТОЧЕЧНЫЙ. ОБЩИЙ массаж означает массаж всей спины; ЧАСТИЧНЫЙ массаж некоторой части спины; ТОЧЕЧНЫЙ массаж определенной точки. В данном режиме микрорегулирование не является обязательным.

▶ В режиме ТОЧЕЧНОГО массажа позволяет осуществлять выбор точек по направлению вверх.

▶ В режиме ТОЧЕЧНОГО массажа позволяет осуществлять выбор точек по направлению вниз.

▶ Остановка массажного механизма спинки и его возврат в исходное положение.

Массаж нижней части тела

- Ручное управление воздушным массажем
- ▶ Выбор воздушного массажа ступней и икроножных мышц
- ▶ Выбор воздушного массажа ступней и ягодиц
- ▶ Выбор воздушного массажа икроножных мышц и ягодиц
- ▶ Выбор воздушного массажа ступней, икроножных мышц и ягодиц

▶ Регулирование силы воздушного давления (опция активна в автоматическом/ручном режиме управления)

▶ Выбор массажа «высоким» воздушным давлением

▶ Выбор массажа «низким» воздушным давлением

▶ Отключение массажа воздушным давлением (опция активна в автоматическом/ручном режиме управления)

▶ Отключение массажа воздушным давлением (опция активна в автоматическом/ручном режиме управления)

НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ


ЖК-ДИСПЛЕЙ

Индикатор продолжительности работы и прибавочного рабочего времени


Отображается длина участка массажа в режиме похлопывания шиной

Индикатор скорости вращиванного массажа

Индикатор текущего режима массажа

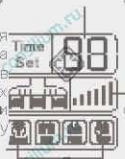


1

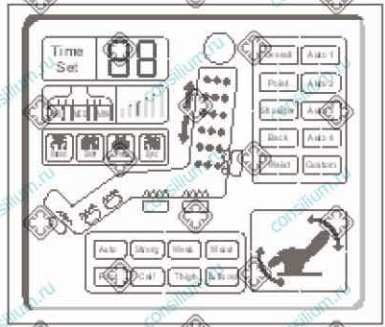

Индикатор направления массажа

Конфигурация изгиба тела

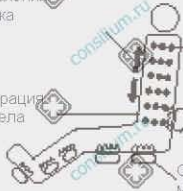


Индикатор режимов массажа спины

Отображены части, массируемые воздушными подушками

2

Индикатор положений массажа спины

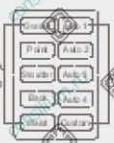


Индикатор положений массажа спины

3

Индикация интенсивности массажа воздушными подушками

Индикация автоматического массажа воздушными подушками

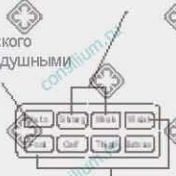

Индикация положений массажа воздушными подушками

4

Индикатор подъема или опускания спинки



Индикатор подъема или опускания опоры для ног

5

МЕТОД РАБОТЫ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ MP3 ПЛЕЕР

В кресле предусмотрен встроенный музыкальный MP3 плеер, для прослушивания музыки вы можете использовать либо громкоговоритель, либо наушники.

- Обновление мелодий


Перед выполнением следующих операций вам необходимо отключить питание.

1. Вставьте карту памяти (для хранения мелодий) в USB разъем компьютера, на котором установлено ОС Windows 2000 или Windows XP.
2. ПК автоматически распознает музыкальный MP3 плеер и установит драйвер устройства.
3. На экране появится имя устройства.
4. Далее вы можете выполнять различные операции (копирование, удаление или вставка из буфера) с диском.
5. После обновления вам необходимо осуществить операцию «безопасного удаления устройства».
6. Присоединив наушники к USB разъему массажного кресла, вы можете прослушать обновленный музыкальный ряд.

Для получения дополнительных инструкций смотрите пункт «Регулирование параметров воспроизведения музыки» раздела «НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ».

ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ

- Если время работы вышло, нажмите на кнопку "power" («питание») для отключения механизма спинки кресла, воздушных подушек и массажного механизма.

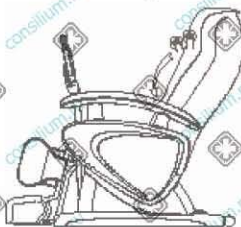

- Нажмите на кнопку "settle" («регулирование»), которая не только выполняет вышеуказанные функции, но и позволяет вернуть спинку и подножку в первоначальное положение.

