

Функции и характеристики

В задней части имеется эксклюзивный подвижный массажный механизм, оказывающий воздействие на всю спину; механизм может автоматически массажировать спину от шеи до талии в 4 изменяемых диапазонах; с помощью кнопки управления механизм можно остановить для массажа в любой точке спины. Этот механизм работает строго в соответствии с заданной функцией. Использование контроллера позволяет работать креслу в следующих режимах:

1. Разминание и пощипывание

В этом особенном режиме имитируются движения квалифицированного массажиста, такие как растягивание, надавливание, разминание и пощипывание болезненных и онемевших мышц спины, при этом вызывается легкое возбуждение мышц, способствующее восстановлению их эластичности и усилению циркуляции крови в месте массирования, что позволяет расслабиться на некоторое время.

2. Раскачивающий массаж

Расслабляющий раскачивающий массаж не только регулирует положение позвоночника и сжимает каждый позвонок и сустав, но и выпрямляет позвоночник, стимулирует симпатический нерв, возбуждает клетки и улучшает кровообращение.

3. Массаж надавливания пальцем

Внутри кресла есть нажимное колесо, имитирующее нажатие пальцев руки и циклически выполняющее нажатие на важные точки спины человека с подходящим усилием. Можно выбрать 3 разных «ширины пальца», что способствует эффективному стимулированию спины, равномерному кровотоку, активизации скрытых возможностей человека и укреплению иммунитета человека.

4. Встряхивание (вибрационный массаж)

Вибрационный механизм в подушке может создавать длительный вибрационную волну массажа, создающего хорошую стимуляцию ног, улучшающего кровообращение в капиллярах и быстро снимающего усталость.

5. Массаж бедер

Восемь массажных головок расположены на бедренной части подушки сиденья. Они осуществляют мягкий, но интенсивный массаж для быстрого снятия боли в бедре.

6. Массаж голеней

Разминание: кресло может делать разминающий массаж голеней сверху вниз и снизу вверх для уменьшения чувства усталости в голених. Подвижные массажные головки системы разминающего массажа расположены в области голеней. Правильно распределенная сила разминания делает процесс более комфортным.

Названия и функции кнопок пульта дистанционного управления

Выключатель

Нажатие на эту кнопку включает или отключает питание.

Кнопка автоматической программы

Нажатие на кнопку запускает массаж в соответствии с программой.

Кнопка функции отрицательных ионов

Нажатие на кнопку включает или отключает функцию отрицат. ионов.

Индикаторная лампочка

Показывает, какая часть тела массируется.

Кнопка выбора частей тела

Выбор части тела для массажа.

Выключатель массажа бедер

Включение или выключение массажа бедер.

Выключатель вибрационного массажа

Включение или выключение вибрации сиденья.

Выключатель массажа голени

Включение или выключение массажа голени.



Экран

Отображение скорости, силы, режима и времени.
Отображение оставшегося времени.

Кнопка таймера

Выбор рабочего времени: 5, 10 или 15 минут.

Кнопка разминающего массажа

Выбор режима разминания.

Кнопка раскачивающего массажа

Выбор режима раскачивания.

Кнопка приема надавливания

Выбор режима надавливания.

Кнопка настройки скорости

Регулировка скорости разминания или постукивания.

Кнопка вверх

Нажатие кнопки приводит к перемещению области массажа вверх по спине.

Кнопка вниз

Нажатие кнопки приводит к перемещению области массажа вниз или остановке массажа.

Режим массажа голени

Можно выбрать один из нескольких режимов массажа голени.

Правила эксплуатации

I Включение массажного кресла

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления массажного кресла, и оно включится.

II Установка длительности массажа

После включения массажного кресла нажмите кнопку таймера , чтобы установить время. Можно выбрать 5, 10 или 15 минут. На дисплее отобразится установленное время работы.




III Программирование массажа

При необходимости автоматического массажа нажмите кнопку , и массажное кресло готово к автоматическому массажу. При этом массажное кресло будет разминать спину и ноги автоматически в соответствии с программой.

IV Массаж спины


1. Выбор разминающего массажа

Нажмите кнопку , и массажное кресло приступит к разминанию спины.


По умолчанию осуществляется массаж всей спины. Но вы можете выбирать различные участки массажа с помощью кнопки , или перемещать область массажа кнопками  и .

2. Выбор приема разминающего массажа

Нажмите кнопку , и массажное кресло приступит к разминанию спины.

По умолчанию осуществляется массаж всей спины. Но вы можете выбирать различные участки массажа с помощью кнопки , или перемещать область массажа кнопками  и .

3. Выбор приема надавливания

Нажмите кнопку , и массажное кресло приступит к выполнению приема надавливания. По умолчанию осуществляется массаж всей спины.

Но вы можете выбирать различные участки массажа с помощью кнопки .

4. Выбор скорости массажа

Когда массажное кресло работает, скорость разминания или разминания можно установить, нажав на кнопку . Имеется три различные скорости. На дисплее отобразятся скорости от L1 до L3. Вы можете выбрать любую скорость массажа по желанию.

Правила эксплуатации

5. Выбор области массажа

- Нажав кнопку **PARTS**, вы можете выбрать одну из трех областей массажа. Рядом с выбранной областью загорится индикаторная лампочка.



Вся спина

Массаж будет осуществляться сверху вниз, от шеи до поясницы.



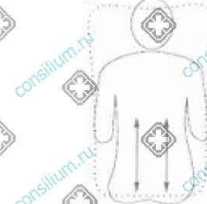
Плечи



Массаж будет осуществляться сверху вниз, от шеи до верхней части спины.



Поясница

Массаж будет осуществляться сверху вниз, от нижней части спины до поясницы.




- Нажмите  или , массажное устройство спинки кресла переместится вверх или вниз. После отпускания кнопки устройство остановится и будет осуществлять точечный массаж. При выборе режима выжимания точечный массаж невозможен.


V Массаж бедер

Нажмите кнопку **THIGH**, массажное устройство подушки сиденья начнет выполнять расслабляющий массаж бедер. Нажмите эту кнопку ещё раз, чтобы остановить массаж.

VI Массаж голени

Устройство имитирует ручное разминание и сдавливание голени. Это стимулирует циркуляцию крови в ногах, расслабляет мышцы ног, снимает боль и судороги.

- Нажмите кнопку , массажное устройство начнет массаж голени. Нажмите эту кнопку ещё раз, чтобы остановить массаж.

- Нажмите кнопку , чтобы настроить режим разминания. Есть три режима интенсивности. На дисплее отображаются режимы от L1 до L3. Вы можете выбрать любой режим по желанию.

VII Регулировка угла наклона спинки

- Если вы хотите опустить спинку кресла, надавите на спинку и потяните регулировочный рычаг. В нужном положении отпустите рычаг, и спинка зафиксируется.

- Если вы хотите поднять спинку кресла, потяните рычаг, не надавливая на спинку.

✳ Регулировка кресла не повлияет на функцию массажа.