

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Эргономичная S-образная конструкция изящной спинки обеспечивает комфорт и эффективность массажа.



2. Деликатный массаж одновременно воздействует на все тело. Механизм переключения спинки, расположенный между шейей и талией, позволяет устанавливать различные режимы массажа: разминание, похлопывание, шиацу и комбинированные виды массажа. Регулировка скорости и ширины импульсов позволяет ослабить напряжение в мышцах и улучшить циркуляцию крови.



Разминание



Похлопывание



Шиаци (точечный массаж пальцами)



Круговое движение

3. Нижний отдел спины получает воздушный массаж. Плотные воздушные подушки, наполняющиеся и спускающиеся попеременно, в области бедер, ягодиц и ног обеспечивают эффективный воздушный массаж, позволяющий снизить нервное напряжение и улучшить циркуляцию крови в нижней части тела.



Одна воздушная подушка в области бедер, а другая – в области ягодиц



12 воздушных подушек в области ног и ступней

4. Общие автоматические команды



Приостановить все опции массажа, автоматически опустить спинку и подножку



Выбор автоматических команд для верхней части спинки (всей спинки)



Шея и плечи: выбор автоматических команд для массирования шеи и плеч



Спина и талия: выбор автоматических команд для массирования спины и талии











Включение автоматических команд для воздушных подушек




Интенсивность воздушного давления: выбор силы («слабое» или «сильное»)

НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

OUTER CONTROL PANEL

-  Включение/отключение функций массажа
-  Выбор продолжительности массажа 10, 20 или 30 минут
-  Отключение всех функций массажа и автоматический возврат спинки кресла в исходное положение
- Автоматические программы массажа верхней части спины
-  Выбор автоматической программы управления верхней частью спинки кресла (всей спинки)
-  Выбор автоматической программы массажа шеи и плеч
-  Выбор автоматической программы массажа спины и талии
- Автоматические программы массажа нижней части тела
-  Автоматические программы включения воздушных подушек
-  Плотность воздушных подушек: выбор уровня



 **Подъем спинки кресла:** подъем спинки кресла сопровождается опусканием подножки. Отпустите кнопку, чтобы прекратить движение спинки. Когда спинка достигнет максимально высокого положения, раздастся предупреждающий сигнал.

 **Опускание спинки кресла:** при нажатии на эту кнопку начнется опускание спинки кресла, сопровождающееся подъемом подножки. Отпустите кнопку, чтобы прекратить движение спинки. Когда спинка достигнет максимально низкого положения, раздастся предупреждающий сигнал.

 **Подъем подножки:** При нажатии на эту кнопку подножка станет подниматься. Отпустите кнопку, чтобы прекратить движение подножки. Когда подножка достигнет максимально высокого положения, раздастся предупреждающий сигнал.



 **Опускание подножки:** При нажатии на эту кнопку подножка станет опускаться. Отпустите кнопку, чтобы прекратить движение подножки. Когда подножка достигнет максимально низкого положения, раздастся предупреждающий сигнал.

НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




Массаж верхней части тела

-  Выбор режима разминания
-  Выбор режима похлопывания
-  Выбор режима надавливания: шицу
-  Выбор комбинированного режима массажа: разминание/похлопывание

Регулирование скорости массажа: SLOW (медленная), MODERATE (средняя), FAST (быстрая). Данная функция недоступна в режиме массажа «надавливание».

Регулирование ширины участка массажа: NARROW (узкая), MIDDLE (средняя), WIDE (широкая). Данная функция доступна только в режиме массажа «похлопывание» и «надавливание».

Выбор места массажа спины: ОБЩИЙ, ЧАСТИЧНЫЙ (плечи, спина или талия) или ТОЧЕЧНЫЙ. ОБЩИЙ массаж означает массаж всей спины; ЧАСТИЧНЫЙ – массаж некоторой части спины; ТОЧЕЧНЫЙ – массаж определенной точки. В данном режиме микрорегулирование не является обязательным.

 В режиме ТОЧЕЧНОГО массажа позволяет осуществлять выбор точек по направлению вверх.

 В режиме ТОЧЕЧНОГО массажа позволяет осуществлять выбор точек по направлению вниз.

 Остановка массажного механизма спинки и его возврат в исходное положение

Массаж нижней части тела

 Ручное управление воздушным массажем

 Выбор воздушного массажа ступней и икр

 Выбор воздушного массажа ступней и ягодиц


 Выбор воздушного массажа икр и ягодиц

 Выбор воздушного массажа ступней, икроножных мышц и ягодиц

 Регулирование силы воздушного давления (опция активна в автоматическом/ручном режиме управления)

 Выбор массажа «высоким» воздушным давлением

 Выбор массажа «низким» воздушным давлением

 Отключение массажа воздушным давлением (опция активна в автоматическом/ручном режиме управления)


 Отключение массажа воздушным давлением (опция активна в автоматическом/ручном режиме управления)

НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

ДИСПЛЕЙ

Индикатор продолжительности работы и прибавочного рабочего времени


Отображается ширина участка массажа в режимах похлопывания и шиацу

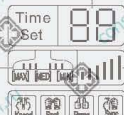

Индикатор скорости комбинированного массажа

Индикатор текущего режима массажа

1

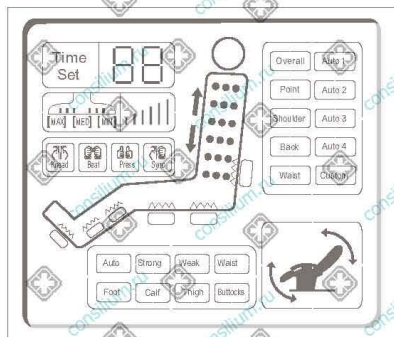

Индикатор направлений массажа


Конфигурация изгиба тела

Индикатор режимов массажа спины

Отображаются части, массируемые воздушными подушками

2

Индикатор положений массажа

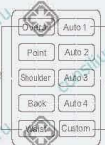

Индикатор положений массажа спины

3

Индикация интенсивности массажа воздушными подушками

Индикация автоматического массажа воздушными подушками



Индикация положений массажа воздушными подушками

4

Индикатор подъема или опускания спинки



Индикатор подъема или опускания опоры для ног

5

МЕТОДЫ РАБОТЫ



ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ


- Вставьте штепсельную вилку в розетку.
- Установите выключатель (расположенный в нижней части задней крышки) в положение вкл.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Продолжительность работы соответствует продолжительности массажа, которая указана на экране в графе «прибавочное время». По истечении времени работы все массажные функции отключаются, массажный механизм возвращается в свое первоначальное положение. Продолжительность работы может составлять 10, 20 или 30 минут, по умолчанию продолжительность составляет 20 минут.


НАКЛОН СПИНКИ КРЕСЛА НАЗАД

Нажмите и удерживайте кнопку «», спинка начнет постепенно опускаться, в то время как подножка будет подниматься. Когда спинка достигнет необходимого положения, отпустите кнопку «», спинка и подножка останутся. По достижении максимально высокого или максимально низкого положения спинки и подножки раздастся звуковой сигнал.

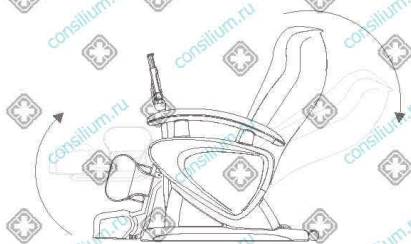

Наклон спинки кресла назад


Кнопка подъема
Кнопка опускания

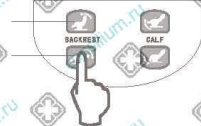

НАКЛОН СПИНКИ КРЕСЛА ВПЕРЕД

Метод включения совпадает с вышеуказанным.

Кнопка подъема
Кнопка опускания

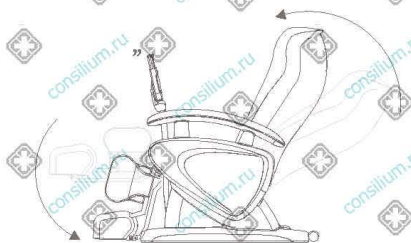


Наклон спинки кресла вперед

МЕТОДЫ РАБОТЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ

Если время работы вышло, нажмите на кнопку "power" («питание») для отключения механизма спинки кресла, воздушных подушек и массажного механизма

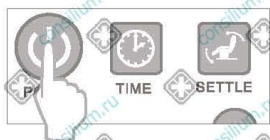

Нажмите на кнопку "settle" («регулирование»), которая не только выполняет вышеуказанные функции, но и позволяет вернуть спинку и подножку в первоначальное положение.

