



**(2). Описание компонентов**

1. Внешняя терапевтическая головка с 9 шариками, внешняя терапевтическая головка с 3 шариками
2. Пульт управления
3. Корпус физиотерапевтической кушетки
4. Вспомогательная подушка
5. Основание кушетки
6. Крепление пульта управления
7. Соединение между пультом управления и внешней физиотерапевтической головкой
8. Поддача электропитания

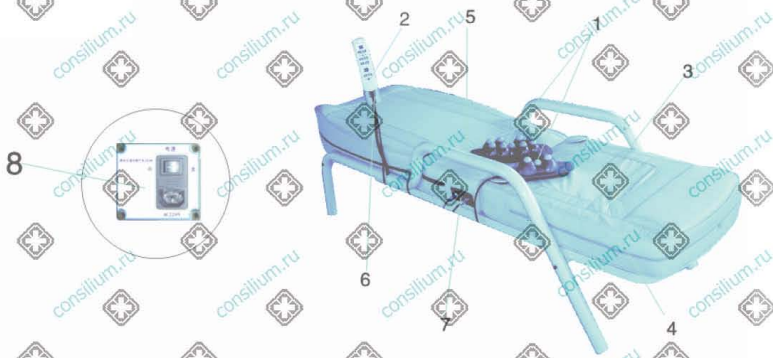

**(3). Описание пульта управления**

1. Дисплей отображения температуры и состояния задней терапевтической головки
2. Клавиша установки температуры для задней терапевтической головки
3. Клавиша автоматического режима
4. Индикаторная лампа автоматического режима
5. Индикаторная лампа на 1 час
6. Клавиша ручного режима
7. Клавиша включения
8. Клавиша выключения
9. Клавиша установки температуры для внешней физиотерапевтической головки
10. Клавиша установки температуры для внешней физиотерапевтической головки
11. Индикаторная лампа питания внешней физиотерапевтической головки
12. Клавиша питания внешней физиотерапевтической головки

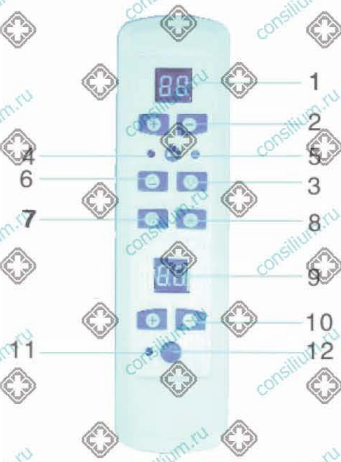

## УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### (1) Подготовка к применению

Приготовьте одежду из хлопка с плотностью пижамы и развяжите пояс и галстук.

### (2) Как работать с пультом управления

#### • Автоматический режим

В автоматическом режиме кушетка работает автоматически в течение приблизительно 40 минут. Перед применением проверьте надежность подключения пульта управления.

Действие 1: Нажмите "On"

Зажигается индикаторная лампа на 1 час.

Действие 2: Установите необходимую температуру (45°C ~ 55°C) при помощи клавиши установки внутренней температуры. При первом нажатии отображается ранее установленная температура. При втором нажатии начинается установка новой температуры.

Действие 3: Нажмите клавишу "Auto". Загорится индикаторная лампа автоматического режима, и кушетка будет работать в автоматическом режиме приблизительно 40 минут.

#### • Ручной режим

Ручной режим используется для определенных частей тела.

Нажмите клавишу "On", чтобы зажеглась индикаторная лампа на 1 час.

Нажмите клавишу настройки внутренней физиотерапевтической головки, чтобы выбрать необходимую температуру.

Нажмите клавишу "Manual" (Ручной режим), чтобы воздействовать на определенные части тела. По окончании работы в ручном режиме необходимо нажать клавишу "Stop" (остановить) и отключить питание.

Перед применением проверьте подключение пульта управления.

#### • Как работать с внешней физиотерапевтической головкой

Нажмите клавишу питания внешней физиотерапевтической головки.

Зажигается индикаторная лампа питания внешней физиотерапевтической головки.

Установите необходимую температуру при помощи клавиш «+» и «-».

По окончании работы нажмите клавишу питания, чтобы выключить внешнюю физиотерапевтическую головку.

### (3) Инструкции по применению

#### 1. Основной способ применения

- А) Воздействие на верхнюю часть тела.
- Б) Прогревание и воздействие на область живота посредством дальнего инфракрасного излучения.

#### Инструкции по применению

- А) Лягте на кушетку, положив голову на корпус, а ноги – на валик.
- Б) Предпочтительнее поводить массаж рук и области живота при помощи физиотерапевтической головки с тремя шариками в автоматическом режиме.
- В) Выполните массаж нужной части тела в автоматическом или ручном режиме попеременно несколько раз.

#### 2. Применение в области живота

- А) Массаж области живота.
- Б) Прогревание области живота при помощи дальнего инфракрасного излучения.

#### Инструкции по применению

- А) Лягте на кушетку, положив голову на корпус, а ноги – на валик.
  - Б) Выполните массаж области живота с помощью клавиши ручного режима на пульте управления.
- Нельзя массажировать грудную клетку при выполнении массажа области живота. Область живота можно массажировать только в ручном режиме.

#### 3. Применение для двух человек одновременно

- А) Один человек использует основной способ применения.
- Б) Для второго человека физиотерапевтическая головка с 3 шариками кладется на пол, и он сидит на ней, выполняя массаж различных частей тела при помощи физиотерапевтической головки с 9 шариками.