

## НАЗВАНИЕ ЧАСТЕЙ



## ИНСТРУКЦИИ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ


### 1. POWER: ПИТАНИЕ:

Включите/выключите механизм. Когда питание включено, время отключения равняется 20 мин. И затем показывается дополнительное время.

### 2. TIMING: ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ:

При включении выберите время массажа от 10, 20 или 30 минут, что показывается на экране соответственным образом. После установки экран показывает рабочее время. Дополнительное время.

3. AUTO: АВТО: В начале работы включаются автоматические массажные режимы

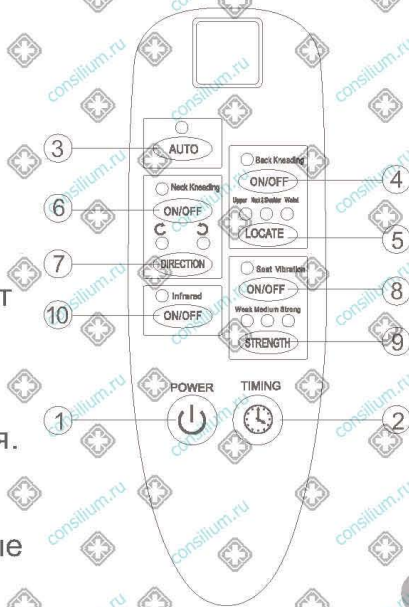

4. Back kneading: включение/выключения массажа спины.

5. LOCATE: Локальный массаж : Когда включен массаж спины, можно выбрать три массажные позиции: UPPER BODY (верхняя часть тела), NECK (шея) & SHOULDER (плечи) , BACK (спина) & WAIST (поясница).

6. Neck kneading: Разглаживание шеи: При включении включите/выключите разглаживание шеи.

7. DIRECTIONS: НАПРАВЛЕНИЯ: При разглаживающем массаже шеи выберите CLOCKWISE (по часовой стрелке) и ANTI-CLOCKWISE (против часовой стрелки).


8. Seat vibration: Вибрация сиденья: включите/выключите вибрацию сиденья.

9. Strength: (Сила): При работе вибрации сиденья выберите три силы вибрации от WEAK (слабый), MEDIUM (средний) или STRONG (сильный).


10. Infrared Инфракрасное излучение: Вкл/выкл инфракрасную терапию.

## СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Вставьте вилку в розетку, включите, экран покажет "OF"
2. Нажмите кнопку POWER (питание) для включения массажа. За подробностями обращайтесь к ИНСТРУКЦИЯМ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ.
3. Аппарат можно использовать на диванах, офисных стульях или лежа на кровати.

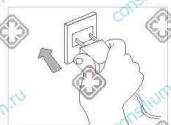

4. Чтобы остановить массаж нажмите кнопку POWER (питание) еще раз и выньте вилку из розетки.

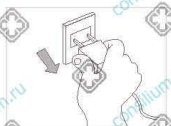

**внимание**

Если при использовании происходит что-то неожиданное, пожалуйста выньте вилку из розетки и свяжитесь с отделом гарантийного обслуживания. Запрещено разбирать массажную матрас-накидку без должной квалификации.


# ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

## ВОЗМОЖНОСТИ

- Используются три традиционных режима массажа.


**Разглаживание:** Посредством имитации разнообразных действий массажиста устройство помогает укрепить мышцы и снять утомление.

**Небольшая пульсация:** Повторно предлагается однородный и удобный пульсирующий массаж.

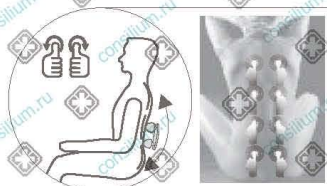

## ФУНКЦИИ

- Ослабление мышечного утомления
- Глубокий массаж мышечных тканей полезен для снятия утомления и расслабления
- Снятие боли в спине и снятие опухоли тканей
- Улучшение кровообращения

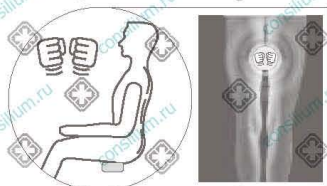

# ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Симптом	Проверьте	Решение проблемы
Не работает	1. Не Отключено ли питание 2. Не выскочила ли из розетки вилка 3. Включается ли	1. Начните использование после включения питания 2. Вставьте вилку в розетку 3. Включите
Не функционирует разглаживание	1. Включается ли	1. Включите
Не функционирует вибрация	1. Включена ли функция вибрации 2. Не выдернулась ли вилка	1. Включите функцию вибрации 2. Вставьте вилку в розетку
Внезапная остановка работы	1. Не отключилось ли питание 2. Не выдернулась ли вилка	1. Начните использование после включения питания 2. Вставьте вилку в розетку