


ДИСПЛЕЙ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

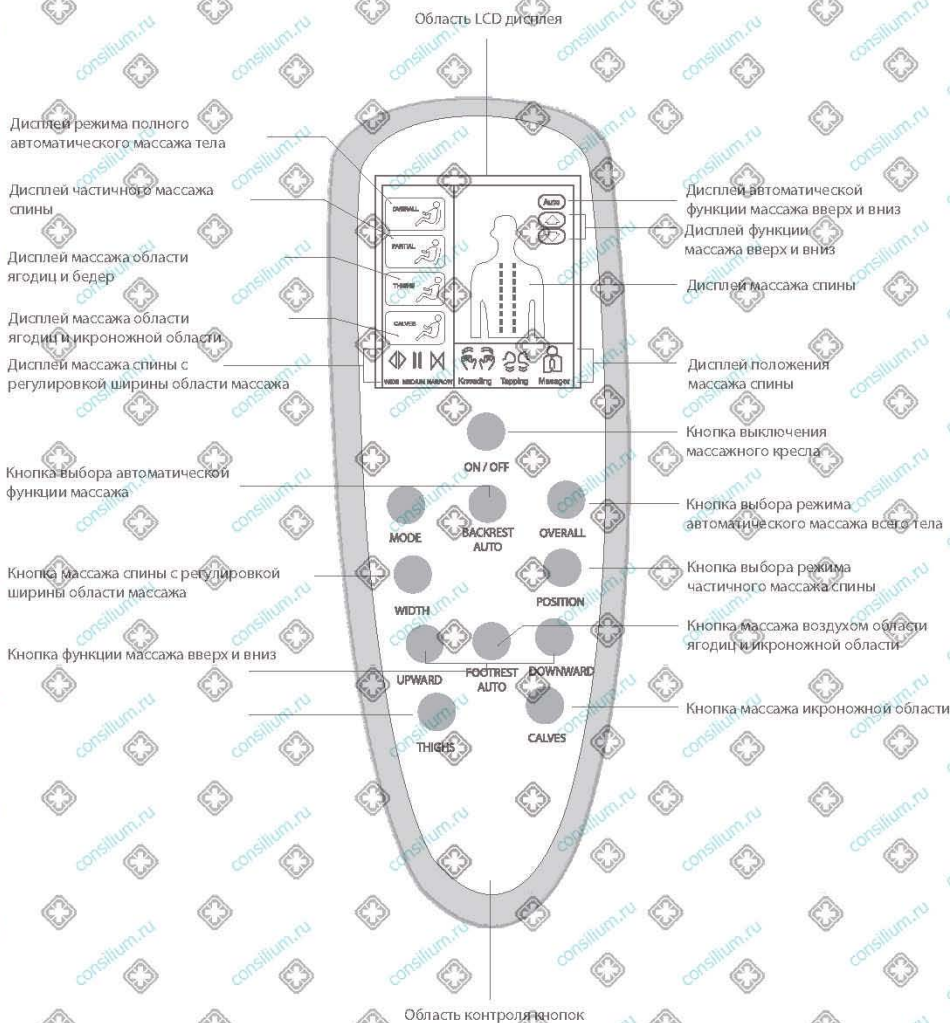

ФУНКЦИИ

- Разминающий/ постукивающий/ массаж круговыми движениями в области шеи/плечей/спины и поясничной области
- Воздушный массаж в области икр
- Воздушный массаж в области бедер
- Угол наклона опоры для спины регулируется от 105° до 170°, опора для ног может регулироваться в пределах от 10 до 90° для удобного массажа
- Массажное кресло повторяет контуры вашего тела и обеспечивает глубокий массаж

СПЕЦИФИКАЦИИ

Название продукта	EC-569
Источник питания	Перемен. ток 220-240 вольт 50 Гц
Потребление энергии	Около 260 вт
Размеры упаковки	Дл. 126 x Шир. 75 x Выс. 82 см
Чистый вес	Около 65 кг
Валовый вес	Около 81 кг
Время работы	30 минут

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием

- Подключите прибор к источнику питания.
- Вставьте вилку в розетку.
- Приведите выключатель на задней панели массажного кресла в положение «I/(ВКЛ)».

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ

- Кнопка ON/OFF массажного кресла
Однократное нажатие на данную кнопку вызывает включение подсветки экрана LCD, в то же самое время происходит активация таймера обратного отсчета. Программа массажа должна быть осуществлена в течение 30 минут, чтобы вы могли наслаждаться его эффектом. Повторное нажатие данной кнопки останавливает все программы массажа, и массажное кресло приходит в исходное положение настроек.

ВНИМАНИЕ: Режим автоматического массажа спины и Режим автоматического массажа ног рекомендуется после тяжелого рабочего дня, чтобы испытать на себе различные методы массажа и комбинации функций.

- Кнопка ON/OFF автоматического массажа спины
Однократное нажатие на данную кнопку позволяет проводить массаж области спины автоматически и позволяет выбрать между разминающим/ постукивающим массажем/ массажем круговыми движениями, широкой/ средней / узкой областью массажа и автоматически и выбирает положение массажа между шей / спиной / поясничной областью/ обратным массажем автоматически, одновременно активируется массаж в неподвижной точке.
- Кнопка выбора режима массажа спины
Нажмите на данную кнопку, чтобы переключать способы массажа между разминающим/ постукивающим массажем/ массажем круговыми движениями.
- Массаж круговыми движениями и постукивающий массаж при помощи регуляционной кнопки
В режиме постукивающего массажа/ массажа круговыми движениями нажмите эту кнопку один раз, чтобы автоматически отрегулировать область массажа между широкой/ средней/ узкой, при разминающем массаже данная кнопка не действует.

- Кнопка регулирования положения массажа спины в зафиксированной точке
На приборе имеется две кнопки, которые предназначены для регулировки положения массажа спины в зафиксированной точке. Нажмите и удерживайте кнопку вверх/вниз, и отпустите, когда массажный ролик спины окажется в необходимом положении.
- Кнопка выбора массажа всей спины
Однократно нажмите данную кнопку, когда включен режим частичного массажа спины.
- Кнопка выбора позиции массажа спины
Однократно нажмите данную кнопку, чтобы выбрать между массажем шеи / спины/ поясничной области.
- Кнопка ON/OFF автоматического массажа области ног
Однократно нажмите данную кнопку, чтобы активировать воздушный массаж икроножной области и бедер, переключая между воздушным массажем икроножной области и бедер автоматически. Нажмите эту кнопку снова, чтобы отключить данную функцию.
- Кнопка ON/OFF воздушного массажа икроножной области
Однократно нажмите данную кнопку, чтобы активировать воздушный массаж икроножной области, переключая между двумя режимами автоматически. Нажмите эту кнопку снова, чтобы отключить данную функцию.
- Кнопка ON/OFF воздушного массажа бедер
Однократно нажмите данную кнопку, чтобы активировать воздушный массаж бедер, переключая между двумя режимами автоматически. Нажмите эту кнопку снова, чтобы отключить данную функцию.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Нажмите кнопку ON/OFF, массажное кресло автоматически прекратит выполнение всех программ и автоматически изменит настройки.
- Приведите выключатель на задней панели массажного кресла в положение «О/(ВЫКЛ)».
- Выньте вилку из розетки, если прибор не используется.